

# NDP Air Total+ Green

Disinfettante aereo  
per superfici

- Ideale per disinfezioni finale.
- Efficace contro: Batteri, Micobatteri, Funghi ed enveloped virus.
- Contiene gas propellente ecologico.



**Vesimin  
Health**

Preventing infections

# NDP Air Total+ Green

## Applicazioni

- Sale operatorie.
- Studi medici ed odontoiatrici.
- Laboratori e camere bianche.
- Studi veterinari.
- Ambulanze.
- Mezzi di trasporto.
- Condotti di aria condizionata.

## Efficacia

- **Batteri:** (EN1276, EN13697, EN13727) *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Bordetella bronchiseptica*.
- **Funghi:** (EN1650, EN13697, EN13624) *Aspergillus brasiliensis (niger)*, *Candida albicans*.
- **Enveloped virus:** (EN14476) contra H1N1, virus gripale surrogato para virus lipofilicos (Gripe, Coronavirus, Ébola, Hepatitis, VIH...).
- **Micobatteri:** (EN14348) *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium terrae*.

## Composizione

- Cloruro di didecil dimetil ammonio.
- Fenossietanolo.
- Aldeide cinnamica.
- Propellente ed eccipienti.

## Formati

- Bombola da 50ml per la disinfezione di <math> < 40\text{m}^3 </math>.
- Bombola da 300ml per la disinfezione di <math> < 150\text{m}^3 </math>.



CE  
0476

NDP Air Total+ Green è un prodotto per la disinfezione per nebulizzazione delle superfici ed apparecchiature Mediche. La valvola "one-shot" nebulizza il contenuto in una singola applicazione e permette al prodotto di raggiungere anche, gli angoli più difficilmente accessibili.

Si caratterizza per un **ampio spettro biocida** ed agisce in tempi brevi su batteri, funghi, micobatteri e virus.

Non contiene gas infiammabili, ne ingredienti tossici. Ciò permette l'utilizzo in luoghi dove non si possono applicare altri prodotti. È totalmente compatibile con tutti i tipi di materiali e componenti elettroniche.

**Dispositivo Medico di Classe IIa.**

NDP Air Total+ Green contiene gas ecologico 


## Ampio spettro biocida

### Istruzioni d'uso:

Si può visitare il sito web per guardare i video del prodotto.




1 Posizionare il flacone su una superficie piana e rimuovere il sigillo.

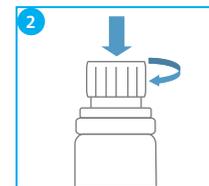

2 Premere e girare la valvola di scarico totale, consentendo al prodotto di disperdersi nell'ambiente.



3 Il prodotto si vaporizza su un'area di:  
- 40 m<sup>3</sup> in un minuto (formato 50 ml)  
- 150 m<sup>3</sup> in tre minuti (formato 300 ml)  
Una volta che l'ambiente è impregnato, lasciare agire.

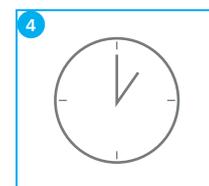

4 Tempo minimo di applicazione 1 ora (se non sono diversamente previsto da protocolli interni). Ventilare l'ambiente prima di rientrare nella zona disinfettata. Applicare in assenza di persone.

### Disponibili le strip di valutazione sulla diffusione dell'NDP Air Total + Green

- Al contatto con il disinfettante la strip cambia colore indicando l'effettiva disinfezione della superficie.
- Evita che non vengano disinfettate le aree meno accessibili.
- Rapida e pratica visualizzazione.

 **Vesismín**  
Health  
Preventing infections

C/ Lluçà, 28 - 08028 Barcelona - T. +34 934 095 301  
vesismín@vesismín.com - www.vesismín.com

DISTRIBUITO IN ITALIA DA:

**genimpex**

Viale lombardia 143 – Brugherio (MB)  
Tel. +39 039 59.65.389  
Mail. info@genimpex.it